

Manuale d'istruzioni

Microdermoabrasione

Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiarne gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.

Riciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

Dichiarazione di conformità CE


Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EU
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Benvenuti!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.

Pannello frontale

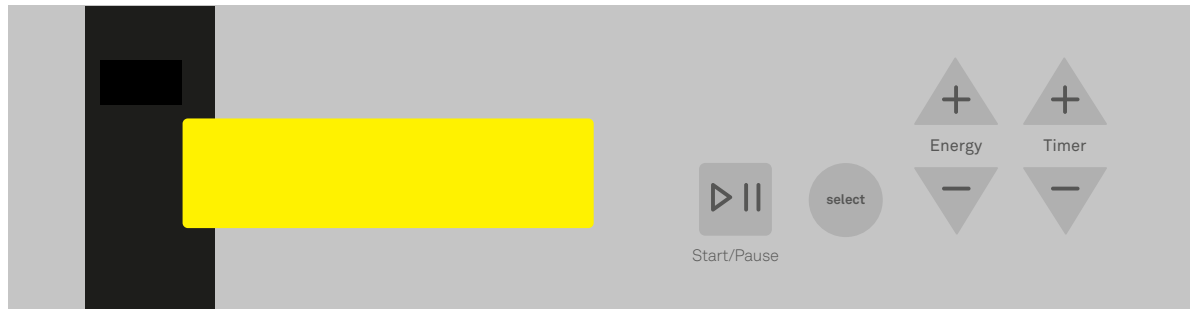


Istruzioni d'uso

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel pannello posteriore.
2. Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".
3. Premere il tasto "FUNCTION" per selezionare la funzione desiderata, nel seguente ordine:
Microdermoabrasione con micro cristali
Microdermoabrasione con punte di diamante

MICRODERMOABRASIONE CON MICRO CRISTALLI


Contenitori di micro cristalli:

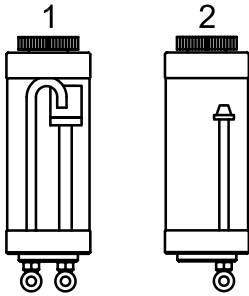

1. Contenitore di micro cristalli usati.
2. Contenitore di micro cristalli nuovi.

Istruzioni d'uso


1. Fissare il supporto porta manipoli di plastica, lateralmente, sull'apparato.
2. Collegare i tubi correttamente come mostrato nello schema, facendo corrispondere le lettere di ciascun tubo con quelle dei contenitori. Per collegarli basta inserire il tubo ed esercitare una leggera pressione. Per rimuoverli, è necessario premere la parte in plastica della connessione e tirare il tubo senza forzarlo.

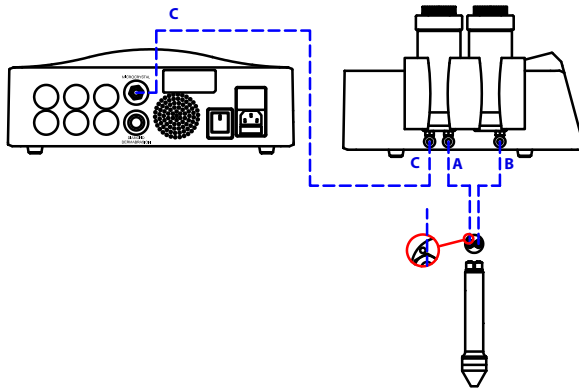

3. Riempire il contenitore n°2 con micro cristalli, facendo attenzione a non superare la linea indicata. La parte filettata del tappo deve essere completamente ripulita di micro cristalli; sono raccomandati i micro cristalli di granulometria 120.

Note importante:

- Verificare che la testina del manipolo non ostruisca il foro all'interno
- Non manipolare i micro cristalli con le mani.

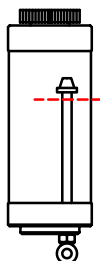

4. Regolare la potenza e la durata del trattamento tramite i tasti "ENERGY" e "TIMER", rispettivamente. La potenza d'uscita per difetto è 1 (regolabile 1-10) e la durata del trattamento predefinita è di 15 minuti (regolabile da 0-60 minuti).

5. Premere il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento. A questo punto il display dinamico indicherà che l'apparecchiatura è in funzione. L'operazione potrà essere interrotta e ripresa premendo lo stesso tasto.

6. Una volta terminato il tempo di durata del trattamento sarà emesso un segnale acustico, la funzione selezionata smetterà di funzionare e l'unità entrerà in modalità standby.

7. Finito il trattamento, il contenitore # 1 si sarà riempito di microcristalli usati ed il contenitore #2 sarà vuoto. Rimuovere e gettare i micro cristalli utilizzati e riempire il contenitore #2 per i trattamenti futuri. La parte del tappo filettata deve essere completamente pulita di microcristalli.

Nota importante: Non manipolare i micro cristalli con le mani.

Note

- Durante il trattamento tenere sempre il manipolo al di sotto dell'apparecchiatura: non lavorare mai reggendo il manipolo al di sopra dell'unità.
- Il contatto con la pelle dovrebbe durare tra 3 e 5 secondi. Una volta trascorso questo tempo, sollevare il manipolo ed applicarlo in un altro punto della zona da trattare.

Precauzioni


- Disinfettare ed asciugare la pelle. Non è necessario applicare alcuna lozione prima del trattamento.
- Coprire gli occhi durante il trattamento per evitare che posano entrarci micro cristalli.
- Durante il trattamento intorno alla zona degli occhi, regolare il livello di potenza tra 1 e 5. Basterà applicare il soffione in questa zona soltanto due volte.
- Evitare l'esposizione al sole nelle 24 ore successive al trattamento.
- Non usare trucco nelle quattro ore successive trattamento.
- Non sottoporsi a sessioni di sauna nei 10 giorni successivi al trattamento.
- Dopo aver completato il trattamento, utilizzare prodotti neutri per reidratare la pelle: evitare assolutamente prodotti acidi.

MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE DI DIAMANTE

1. Connettere correttamente un lato del tubo nel pannello posteriore, come indicato nell'immagine seguente.
2. Connettere l'altro lato del tubo al manico di suzione. Collegare il capezzale di diamante corretto nel manico. Ci sono nuove tipi di capezzali.

Ø 22mm	
D100	Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti e aree con smagliature.
D180	
Ø 19 mm	
D180	Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare.
D220	
Ø 15 mm	
D100	Cicatrici, linee fine e diversi inestetismi.
D200	
D250	
Ø 8 e 6 mm	
D200	Occhi e d entrambi i lati del naso. Rughe, acne, brufoli e punti neri.
D250	

3. Assicursi che il filtro di schiuma sia nella corretta posizione all'interno manico.
4. Assicursi che il filtro di metallo sia nella posizione corretta all'interno del manico.

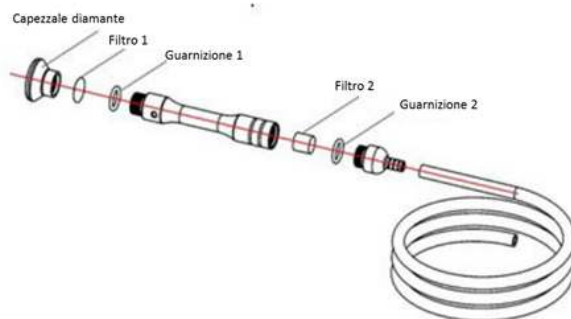

5. È possibile modificare l'effetto di suzione tramite il tasto "ENERGY".
6. Connettere correttamente un lato del tubo nel pannello posteriore, come indicato nell'immagine seguente.
7. Connettere l'altro lato del tubo al manico di suzione. Collegare il capezzale di diamante corretto nel manico. Ci sono nuove tipi di capezzali.

Precauzioni

- Non lasciare il manico sulla stessa zona della pelle troppo a lungo, al fine di evitare possibili lesioni.
- Evitare l'utilizzo su pelli irritate.
- Le seguenti aree della pelle non sono adeguate a questo tipo di trattamento: tumori della pelle, nei, marche, angioma, labbra, occhi, herpes e verruche.
- Non lasciare la pompa di suzione in funzione per periodi di tempo prolungati senza aspettare il necessario tempo di raffreddamento tra un trattamento e l'altro, al fine di evitare il surriscaldamento della pompa e conseguenti danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del produttore.

FAQ

Microdermoabrasione con punte di diamante

Se l'effetto di suzione si riduce:

- Sostituire i filtri di metallo e di schiuma.

MANUTENZIONE

Microdermoabrasione con micro cristalli.

- Il filtro nel contenitore n°. 1 impedisce che i micro cristalli penetrino nel circuito di aspirazione dell'apparecchio. Vengono consegnati quattro filtri di ricambio. Per sostituire il filtro sarà necessario svitare il tappo del contenitore, rimuovere il vecchio filtro, inserire il nuovo filtro e riavvitare il tappo.
- Pulire e disinfettare la parte superiore del manico dopo ogni trattamento. È raccomandato immergerli prima in uno sterilizzatore ad ultrasuoni e poi in uno sterilizzatore UV.
- Non utilizzare l'apparecchio se non è installato il filtro del tubo collegato al dispositivo.
- Questo filtro deve essere sostituito ogni 5 trattamenti.
- Per sostituire il filtro:
 - Svitare la parte superiore del serbatoio.
 - Rimuovere il filtro tirandolo fuori ed inserire quello nuovo.
 - Avvitare la parte superiore del serbatoio, assicurandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente.

Note: prima di avvitare la parte superiore, pulire eventuali tracce di micro cristalli nella filettatura e nella guarnizione in silicone per mantenere l'ermeticità.

Vengono consegnati quattro filtri di ricambio per la sostituzione.

Microdermoabrasione con punte di diamante

- I filtri di schiuma ed i filtri di metallo presenti nel manico devono essere sostituiti ogni 5 trattamenti. Smontare il manico e sostituire i filtri, quindi rimontare il manico.
- Pulire e disinfettare le teste di diamante dopo ogni trattamento.